

wiser

WHATEVER YOUR SMILE
LASER IS THE ANSWER



PRZEWAGA DLA CIEBIE

KORZYŚCI DLA TWOICH PACJENTÓW



Szybsze zabiegi, krótszy czas gojenia, zero krwi, mniej znieczulenia, mniej bólu: witamy w idealnym gabinecie stomatologicznym. Wsparcie lasera diodowego Wiser rewolucjonizuje świat opieki stomatologicznej.



DLA PACJENTA

Nie odkładaj wizyty u dentysty z powodu lęku i strachu. Teraz masz Wiser – najnowocześniejszą technologię laserową, która skutecznie zmienia pojęcie wizyty stomatologicznej. Wiser zastępuje igły i skalpel, eliminuje konieczność zakładania szwów i stosowania leków, umożliwiając leczenie pacjentów w każdym wieku i z różnymi potrzebami terapeutycznymi, w większości przypadków bez konieczności użycia znieczulenia. Wyobraź sobie spokojną i bezbolesną wizytę u dentysty. Wyobraź sobie szybkie gojenie bez obrzęków. Przestań sobie to wyobrażać i zacznij doświadczać nowego wymiaru leczenia dzięki Wiser.



DLA LEKARZA

Witamy w erze minimalnie inwazyjnej stomatologii. Dziś pacjenci, oprócz skutecznej i wysokiej jakości opieki, oczekują, że będą leczeni z wykorzystaniem najlepszej technologii, która zaspokoi ich dodatkowe potrzeby: brak strachu i lęku przed wizytą u dentysty. Oferowanie minimalnie inwazyjnej opieki nie tylko zwiększy lojalność Twoich pacjentów, ale także pomoże zdobyć nowych. Pozwól, aby Wiser wspierał Twoje propozycje leczenia, odpowiadając na potrzeby każdego z Twoich pacjentów. Zobaczysz, że jest to nie tylko przyjazna dla pacjentów technologia, ale także narzędzie, które wyróżni i znacząco ulepszy Twoją praktykę.

WYZNACZ SWÓJ CEL OSIĄGNIJ GO Z WISER

Dział badawczo-rozwojowy Doctor Smile wybrał optymalne długości fal, aby zapewnić maksymalną skuteczność w praktyce klinicznej. **Trzy źródła laserowe** są w stanie sprostać wszystkim zastosowaniom stomatologicznym, gwarantując najlepsze efekty gojenia w chirurgii tkanek miękkich, dekontaminacji bakteryjnej i fotobiomodulacji.

Ale Doctor Smile poszedł o krok dalej: dzięki certyfikowanym, predefiniowanym protokołom systemowym, Wiser inteligentnie łączy różne długości fal, co pozwala na osiągnięcie doskonałych wyników w krótszym czasie.

Jednoczesne działanie różnych źródeł laserowych zapewnia wyjątkowe rezultaty, wykorzystując najlepsze długości fal, wybrane przez czołowych specjalistów w stomatologii laserowej. Dzięki temu specjalista może skupić się na pacjencie, eliminując ryzyko błędów w ustawieniach i opóźnień operacyjnych, a jednocześnie w pełni wykorzystując swoją wiedzę kliniczną.

KOLEJNY PRZYSTANEK: PRZYSZŁOŚĆ

Pozwól nam przedstawić Ci nową generację technologii laserowej w stomatologii: dzięki trzem różnym długościom fal, Wiser może oddziaływać na wodę, hemoglobinę i melanine, zapewniając szybkość, moc i precyzję w jednym narzędziu. Od fotobiomodulacji po operacje bez szwów – z Doctor Smile zyskujesz klucz do rozwiązania każdego rodzaju problemu.



450nm

Osiąga maksymalny szczyt absorpcji hemoglobiny, dzięki czemu jest to idealna długość fal do uzyskania skutecznych, szybkich i precyzyjnych zabiegów chirurgicznych nawet przy bardzo niskich mocach. To najlepsze rozwiązanie, łączące efektywne cięcie z możliwością dekontaminacji.



635nm

Idealna do zastosowania w zabiegach biostymulacji i dotleniania tkanek, ta długość fal zwiększa aktywność fibroblastów oraz sprzyja obwodowej wazodylatacji.



808nm

Długość fal o wysokiej penetracji, ponieważ jest minimalnie absorbowana przez wodę, a bardziej przez hemoglobinę. To najlepsze rozwiązanie, umożliwiające osiągnięcie głębokiej dekontaminacji.

WSZYSTKO O LASERACH,

ALE NIE TYLKO

Wiser zawsze był najbardziej zaawansowanym laserem diodowym w stomatologii. Jego niezwykła jakość i wiodąca technologia sprawiły, że stał się światowym liderem. Ale to nie tylko kwestia lasera. Interfejs oprogramowania oferuje użytkownikowi nowe funkcje i treści, które sprawiają, że wszystkie zabiegi laserowe są proste, użyteczne i przyjemne.



wiser

 DOCTOR
SMILE
INNOVATION HAS A NAME

TRZECIA GENERACJA TWOJEGO UŚMIECHU

Dzięki nowemu i intuicyjnemu układowi graficznemu, Wiser 3 przenosi Cię na wyższy poziom dzięki trzem różnym trybom użytkownika: *Assisted*, *Advanced* i *Effects*.
Nasze narzędzie wesprze Cię w codziennym odkrywaniu nieskończonych możliwości technologii laserowej, a dzięki intuicyjnemu i łatwemu w obsłudze ekranowi dotykowemu będziesz w stanie poszerzyć zakres usług swojej kliniki, doskonaląc swoje umiejętności i pomagając pacjentom w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej.

Rezultat? Promienne uśmiechy dla każdego.

LAP ASSISTED

Jeśli po raz pierwszy masz do czynienia z technologią laserową, nie martw się – możesz korzystać z Wiser w pełni bezpiecznie dzięki systemowi Laser Assisted Protocol. To interaktywny tutorial, który krok po kroku poprowadzi Cię przez wszystkie etapy wdrażania protokołów klinicznych, eliminując ryzyko błędów i gwarantując doskonałe rezultaty.

ADV ADVANCED

Zaawansowany system zarządzania Wiser Advanced Management System umożliwia doświadczonym użytkownikom personalizację konsoli sterowania. Parametry operacyjne każdej długości fali można dostosować do indywidualnych potrzeb dzięki funkcji ABC („Automatic Balance Calibration”), zapewniając maksymalne zadowolenie zarówno pacjenta, jak i operatora, bez żadnych ograniczeń.

UBE EFFECT

Nowy system sterowania „Use By Effects” pozwala operatorowi zarządzać funkcjami Wiser, zaczynając od efektu, który ma zostać osiągnięty. Po zidentyfikowaniu celu można wybrać pożądany efekt spośród opcji ablacyjnych, dekontaminacyjnych, fotochemicznych i termicznych, co zapewnia najlepszą możliwą terapię dostosowaną do docelowej tkanki.

NAJLEPSZY SOJUSZNIK

W TWOJEJ CODZIENNEJ PRACY

Od otwarcia do zamknięcia drzwi kliniki, odpowiedź, której udzielisz swoim pacjentom, zawsze brzmi TAK! Przygotuj się na stawienie czoła każdemu problemowi, a Wiser zajmie się resztą.

Dzięki licznym protokołom klinicznym szczegółowo opisanym krok po kroku, masz w swoich rękach gotowe umiejętności: jest to całkowicie bezpieczny sposób i z natychmiastowymi rezultatami.

Od periodontologii po chirurgię; niech Wiser będzie naturalnym przedłużeniem Twojej ręki.

Szereg zabiegów, jeden laser, więcej uśmiechów.




- Dekontaminacja kanałów
- Pulpotomia
- Dekontaminacja wierzchołka
- Pokrycie miazgi

ENDODONCJA




- Dekontaminacja kieszonek
- Biostymulacja
- Leczenie recesji dziąseł
- Redukcja stanów zapalnych

PERIODONTOLOGIA

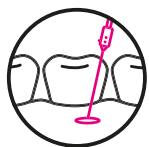

- Desensytyzacja nadwrażliwej zębiny
- Afty | Zapalenie czerwieni wargowej
- Terapia przeciwbólowa TMJ
- Fotobiomodulacja

TERAPIA

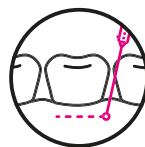


- Gingiwektomia | Gingiwoplastyka
- Korekta wędzidełek
- Retrakcja dziąsła
- Nacięcie i drenaż ropnia

CHIRURGIA




- Dekontaminacja tkanek wokół implantu
- Odświeżenie implantu
- Biostymulacja pozabiegowa
- Dekontaminacja poekstrakcyjna

IMPLANTOLOGIA

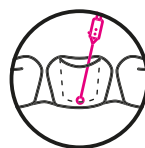

- Dekontaminacja bruzd
- Dekontaminacja ubytków
- Zamykanie kanalików

LECZENIE ZACHOWAWCZE

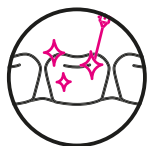

- Wybielanie
- Leczenie naczynek
- Depigmentacja dziąseł
- Uśmiech dziąsłowy

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA



- Chirurgia dermatologiczna
- Hiperpigmentacja
- Regeneracja skóry

MEDYCyna ESTETYCZNA

(środkowa i dolna część twarzy)

POZA GRANICE STOMATOLOGII

Technologia Doctor SMile wprowadza Cię w nową generację stomatologii. Przygotuj się na to, by stać się konsultantem ds. wellness w pełnym zakresie 360°.

Dzięki laserowi Wiser możesz rozszerzyć swoje usługi o dodatkowe dziedziny, takie jak terapia przeciwzapalna i dermatologia (środkowa i dolna część twarzy), korzystając z akcesoriów takich jak opatentowana końcówka **Flat Top®** oraz zestaw dermatologiczny **Revive®**.



W ofercie:

- zestaw 4 tipów PERIO - żółty
- zestaw 4 tipów CHIRURGIA - zielony
- zestaw 4 tipów TERAPIA - czarny
- zestaw 4 tipów IMPLANTY - biały
- zestaw 4 tipów ENDO - błękitny

REVIVE
SKIN PROCESS



FLAT TOP HANDPIECE *AB* 2799

Zaprojektowana przez prof. Alberico Benedicenti,
wylączność dla marki Doctor Smile.



GENOA
UNIVERSITY

wiser

**DOCTOR
SMILE**
INNOVATION HAS A NAME

DUŻE MOŻLIWOŚCI W MAŁYM WYDANIU

Laser Wiser wyróżnia się swoimi zaletami, ale z pewnością nie rozmiarem. Dzięki wadze zaledwie 1,5 kg, **bezprzewodowemu sterownikowi nożnemu** i systemowi Ultra Power Charged, Wiser można łatwo umieścić bezpośrednio na unicie stomatologicznym, bez konieczności stosowania przewodów lub korzystania z wózków.

Duży, 7-calowy ekran dotykowy umożliwia poruszanie się po encyklopedii medycznej za pomocą prostych gestów, wskazując odpowiedni tryb użytkowania i uwidaczniając wszystkie wybrane parametry pracy.

Zapomnij o uciążliwych i kosztownych aktualizacjach: system automatycznego odnawiania oprogramowania Wiser konfiguruje system w ciągu kilku sekund dzięki zintegrowanej funkcji Wi-Fi.



KORZYŚCI

Z KOMUNIKACJI

- ✓ Higiena i bezpieczeństwo
- ✓ Zmiana postrzegania sposobu leczenia
- ✓ Krok ku nowoczesnej stomatologii

WISER mówi sam za siebie. Dzięki laserowi Wiser będziesz mógł zaoferować swoim pacjentom pełne bezpieczeństwo, najwyższą jakość zabiegów i powiew nowoczesności.




WYBITNY

I NIEZAWODNY

- ✓ Rozwój zawodowy
- ✓ Wyjątkowość
- ✓ Świadomość i reputacja

„Mój dentysta jest wyjątkowy!”
Bądź gotowy do świadczenia nowych usług i stań się pięciogwiazdkowym gabinetem w swojej okolicy. To różnica między byciem liderem a obserwatorem.




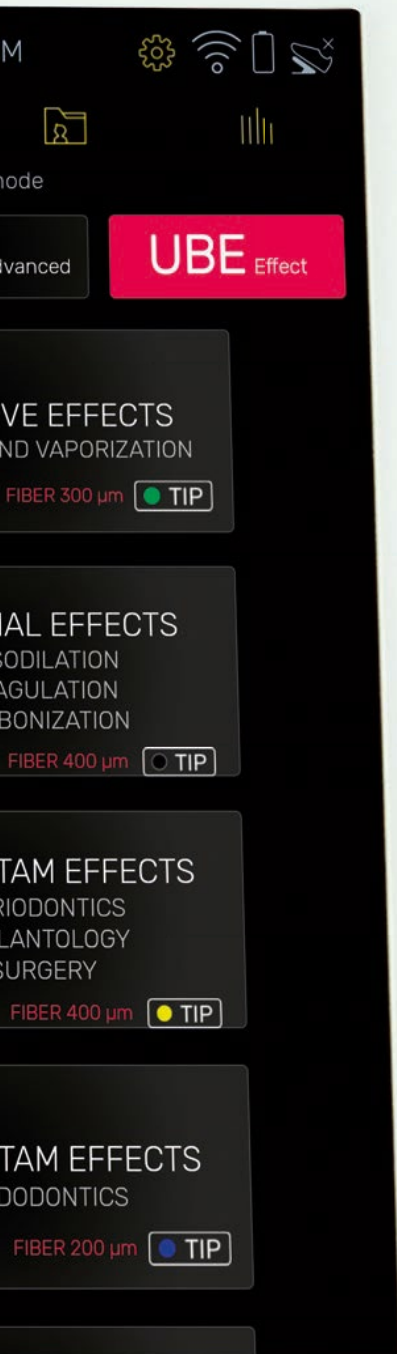

BŁYSKAWICZNY ZWROT INWESTYCJI

- Rozpoznawalność ✓
- Oszczędność czasu ✓
- Szerszy zakres usług ✓

Inwestycja, nie koszty. Laser Pluser zwiększa możliwości Twojej praktyki, generując nowe dochody i możliwości biznesowe w obszarach leczenia, których jeszcze nie próbowałeś.

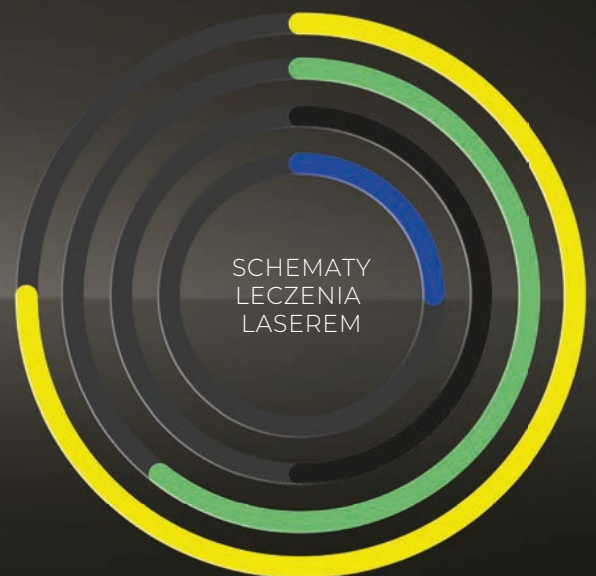

Z EFEKTEM WOW

- Bezbolesne leczenie ✓
- Wizyty bez stresu ✓
- Tworzenie profili stałych pacjentów ✓

Pacjent z wyboru, nie z konieczności - w Twoim gabinecie.
Stomatologia laserowa robi różnicę!
Dzięki specjalistycznym i minimalnie inwazyjnym zabiegom, wizyta u dentysty będzie przeżyciem, o którym będzie się mówić.

DOKTOR SMILE WYBRAŁ MASTER CLASS ACADEMY



Master Class Academy to społeczność tworzona przez dentystów, w celu dzielenia się wiedzą i umiejętnościami wśród kolegów oraz wzajemnego inspirowania się w życiu zawodowym.

Dzięki stałej współpracy z ważnymi krajowymi i międzynarodowymi uniwersytetami, Master Class Academy oferuje szeroki zakres możliwości poszerzania wiedzy dla tych, którzy chcą być zawsze na bieżąco z nowościami w branży i stale rozwijać się zawodowo. MCA to „miejsce”, w którym można znaleźć najnowocześniejsze protokoły naukowe, historie przypadków klinicznych, cenne wskazówki dotyczące zastosowań i wsparcie przez całe życie w codziennej praktyce.

Wizja MCA brzmi: „Jeśli nie można jej natychmiast wykorzystać w pracy, nie jest to prawdziwa nauka”.

Wejść do świata Master Class Academy, odwiedź masterclassacademy.it

Dane techniczne

Kod	LA12D001.5
Długość fali*	808nm, 450nm, 635nm
Moc maksymalna	12W-CW
Rodzaj impulsu	Continuous, pulsed, super-pulsed

Częstotliwość	CW to 25 kHz
Wymiary	155x230x160mm
Waga	1,85 kg
Klasa medyczna	II b
Klasa lasera	4

* Różne długości fal w zależności od modelu.

KONTAKT

Prezes



CHRISTIAN WITT-DOERRING
christian.witt@cwittdental.pl
+48 601 306 862

Dyrektor zarządzający



MARCIN MIŁKOWSKI
marcin.milkowski@cwittdental.pl
+48 609 929 691


Konsultanci medyczni




ANNA BOLESTO
PODLASKIE
anna.bolesto@cwittdental.pl
+48 607 054 075



RADOSŁAW CEBULSKI
WIELKOPOLSKIE, LUBUSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE
radoslaw.cebulski@cwittdental.pl
+48 515 904 399

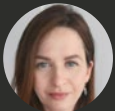


AGATA JĘDRZEJCZYK
MAŁOPOLSKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE
agata.jedrzejczyk@cwittdental.pl
+48 661 014 771

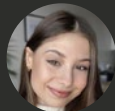

KAROLINA KAPELA
POMORSKIE
karolina.kapela@cwittdental.pl
+48 797 272 157



ŁUKASZ KEFFER
International Sales Menager
OPOLSKIE,
DOLNOŚLĄSKIE
lukasz.keffer@cwittdental.pl
+48 663 551 223

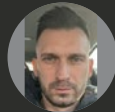

DARIUSZ MICHAŁEK
LUBELSKIE
dariusz.michalek@cwittdental.pl
+48 663 110 234



GRZEGORZ PALICKI
MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE
grzegorz.palicki@cwittdental.pl
+48 608 399 288



MICHAŁ RESZKOWSKI
KUJAWSKO-POMORSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
michal.reszkowski@cwittdental.pl
+48 607 400 225



RAFAŁ TOPOLEWSKI
ŚLĄSKIE
rafal.topolewski@cwittdental.pl
+48 668 406 531



MONIKA ZAHRADNIK
PODKARPACKIE
monika.zahradnik@cwittdental.pl
+48 785 609 165



AMDPI176.1



Via dell'Impresa, 1 | 36040 Brendola (VI) Italy
T +39 0444.349165 | F +39 0444.349954
info@lambdaspa.com | lambdaspa.com

INFO

· doctor-smile.com · info@doctor-smile.com



LA12D001.5 is an EC certified medical product.

All LAMBDA S.p.A. medical laser are certified with CE trademark in accordance with EEC Directives for medical device: EEC Directives 93/42

MADE IN ITALY